

Técnicas

de medición para
la toma de

peso y estatura



Presentación

La Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales, a través del Programa Albergues Escolares Indígenas, tiene como finalidad apoyar el mejoramiento alimentario y nutricional de los niños y jóvenes de los albergues. Para ello está realizando acciones de capacitación a los responsables de los albergues en los diferentes niveles, con objeto de brindarles los instrumentos necesarios para la ejecución de las acciones que les han sido encomendadas.

Como bien sabemos, la evaluación nutricional de los niños es importante, pues nos ayuda a identificar a los niños que se encuentran en riesgo nutricional y así evaluar el impacto de las acciones alimentarias que se llevan a cabo en los albergues.

Existen varios indicadores para evaluar el estado de nutrición de una persona; sin embargo, los más utilizados y sencillos de realizar en grandes grupos de población son las mediciones antropométricas, como el peso y la estatura, que nos arrojan información veraz cuando se aplican de manera adecuada.

Por esta razón hemos elaborado para ti este folleto llamado “Técnicas de medición para la toma de peso y altura”, con la finalidad de facilitarte la tarea de pesar y medir a los niños de los albergues que tienes bajo tu atención.

El folleto contiene información básica respecto a la posición que debe tener la persona que va a ser pesada y medida, el tipo y la colocación adecuada del equipo, así como la técnica de medición que te permitirá obtener datos con un alto grado de precisión y exactitud. En él se desarrolla, paso a paso, cada uno de estos aspectos, que se apoyan con ilustraciones que te servirán para visualizar de manera más clara la forma adecuada de hacer una medición.

Te sugerimos que tengas este folleto a la mano cada vez que realices una medición. Te será de gran utilidad para facilitarte la tarea de pesar y medir y podrás consultarlo inmediatamente cuando tengas alguna duda. Recuerda que hacer una adecuada medición significa clasificar al niño en la categoría nutricional que le corresponde y, por lo tanto, ser atendido de acuerdo con sus necesidades.

La antropometría es la técnica que se ocupa de medir las variaciones en las dimensiones físicas y en la composición global del cuerpo. Dos de las medidas utilizadas con mayor frecuencia son el peso y la estatura porque nos proporcionan información útil para:¹

- a) Identificar niños que pudieran tener anormalidades en el crecimiento.
- b) Determinar patrones de crecimiento en grupos de niños o
- c) Evaluar tratamientos para anormalidades en el crecimiento.

Sin embargo, aunque se considera una técnica sencilla, económica y de fácil aplicación, en la práctica la exactitud y precisión de estas mediciones no son del todo satisfactorias, pues se piensa que son extremadamente fáciles de realizar y por lo tanto se pone poco cuidado y atención al pesar o medir. Para cualquier uso, estas mediciones deben ser tomadas y registradas de manera exacta y así asegurar la buena evaluación del crecimiento del niño.

Con la finalidad de que cuentes con los elementos necesarios para que realices una adecuada medición, a continuación te presentaremos la forma de preparar al niño o la niña para ser pesados y medidos, así como la técnica para que puedas realizar una medición exacta y precisa.

Recuerda que tu tarea es muy importante porque a partir de los datos que tú nos proporciones podremos, en conjunto, evaluar el crecimiento de los niños y niñas que asisten a los albergues escolares y así tomar las medidas necesarias para mejorar su nutrición.

¹ U.S. Department of Health and Human Services. "A Guide to Pediatric Weighing and Measuring". CDC.

■ Técnica de medición del peso


La preparación del equipo siempre se deberá hacer un día antes de ser usado. No deben utilizarse básculas de baño o similares debido a que el resorte pierde flexibilidad con el uso.

■ Báscula de palanca y plataforma

Coloca las vigas en posición de cero, para ello es necesario que quites de la superficie de la báscula (plataforma) cualquier objeto que tenga. Si el niño será medido sobre un tapete, se coloca y después ajustas a cero. Utiliza el tornillo de ajuste y el ajustador a cero hasta que la flecha de la báscula marque cero.

Antes de realizar la medición del peso, es importante que identifiques cualquier discapacidad física o deformidades en el niño o la niña, ya que esto puede prevenir errores y realizar mediciones exactas.² Si el niño muestra alguna resistencia a ser medido, no se debe pesar o medir. Si es estrictamente necesario hacer la medición, se hará una observación anexa al registro.

Lo que sigue es preparar al niño para ser pesado o medido. Antes de subir al niño(a) a la báscula, verifica que no traigan exceso de ropa, como suéter, chamarra, sombrero o cachucha, ni dinero, llaves o cosas pesadas en los bolsillos de los pantalones que pudieran sobrestimar el peso del niño. Se pesan después de haber evacuado y vaciado la vejiga y de preferencia en ayuno.



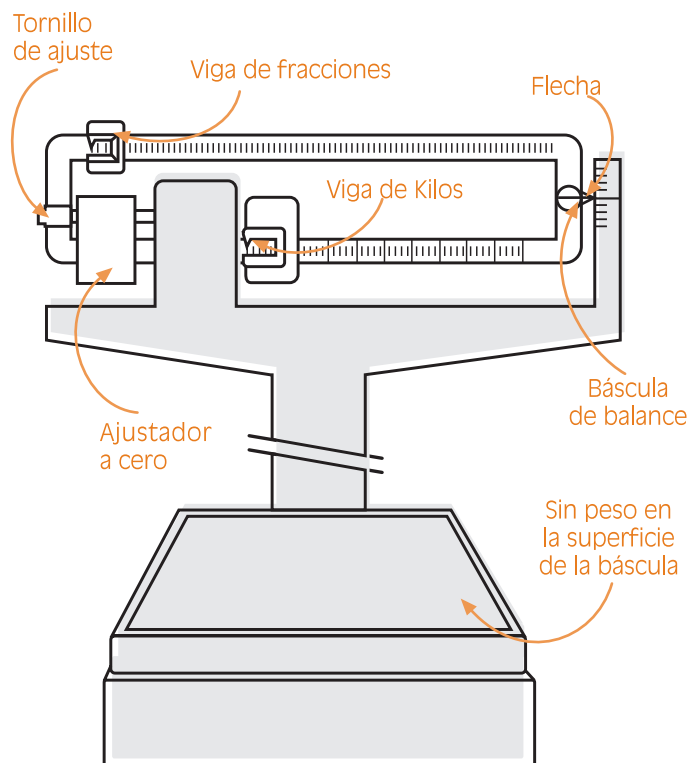


² La medición de niños con discapacidad física requiere otra técnica.


■ Cómo pesar y medir

Para la toma del peso, la báscula se debe encontrar en una superficie plana, horizontal y firme. Antes de iniciar, comprueba el adecuado funcionamiento de la báscula y su exactitud, esto último mediante el uso de pesas previamente taradas si la báscula es de palanca y plataforma.

- 1) Verifica que ambas vigas de la palanca se encuentren en cero y la báscula esté bien balanceada.
- 2) Coloca al niño en el centro de la plataforma. El niño debe pararse de frente al medidor, erguido con hombros abajo, los talones juntos y con las puntas separadas.
- 3) Verifica que los brazos del niño estén hacia los costados y holgados, sin ejercer presión.
- 4) Checa que la cabeza esté firme y mantenga la vista al frente en un punto fijo.
- 5) Evita que el niño se mueva para evitar oscilaciones en la lectura del peso.
- 6) Desliza la viga de abajo (graduaciones de 20 kg), hacia la derecha aproximando el peso del niño(a). Si la flecha de la palanca se va hacia abajo, avanza la viga al número inmediato inferior.
- 7) Desliza la viga de arriba (graduaciones en kg y 100 gramos) hacia la derecha hasta que la flecha de la palanca quede en cero y no esté oscilando. A veces es necesario realizar varios movimientos hasta que quede la flecha fija en el cero.

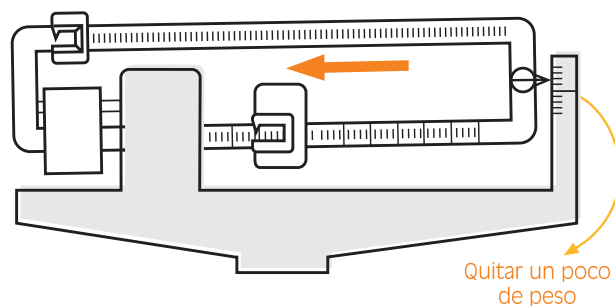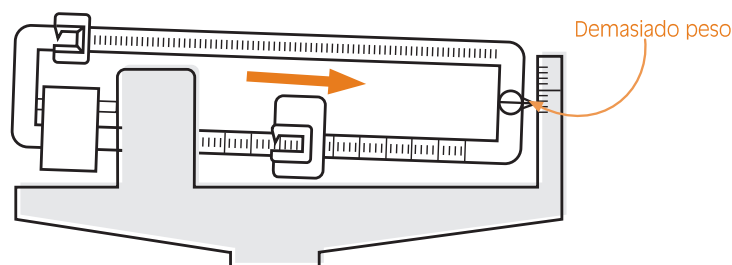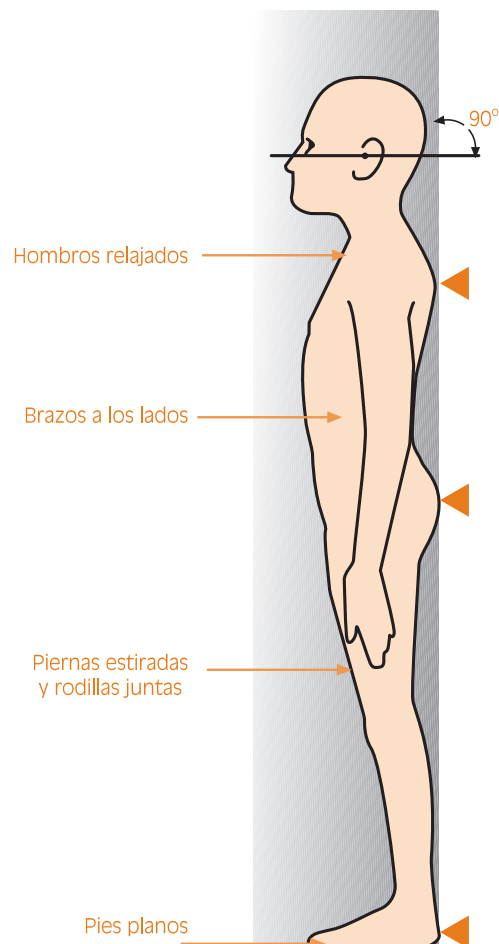


8) Realiza la lectura de la medición en kg y g y de frente. Otra opción es bajar al niño y hacer la lectura. Registra el dato inmediatamente y en voz alta: por ejemplo, 48.5.

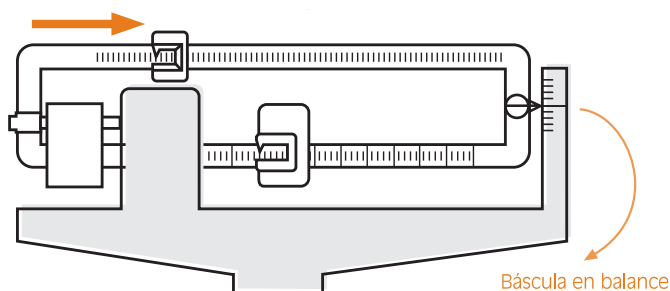


■ Técnica de medición de la estatura

Colocación del estadímetro:


- a) Busca una superficie firme y plana perpendicular al piso (pared, puerta).
- b) Coloca el estadímetro en el piso con la ventanilla hacia delante, en el ángulo que forman la pared y el piso.
- d) Sostén el estadímetro en el piso, en el ángulo que forma la pared y el piso, jalando la cinta métrica hacia arriba hasta una altura de dos metros.

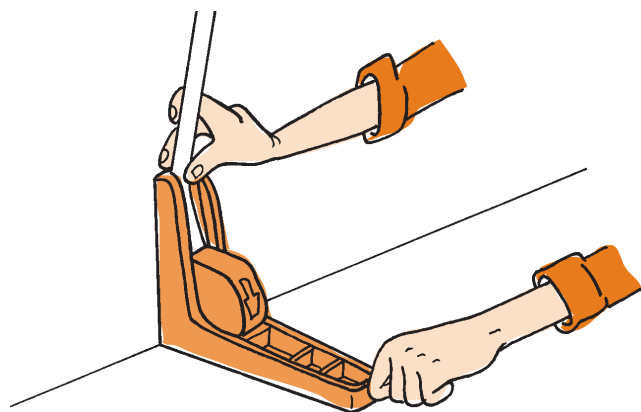

- c) Verifica que la primera raya de la cinta (correspondiente a 0.0 cm) coincida con la marca de la ventanilla.

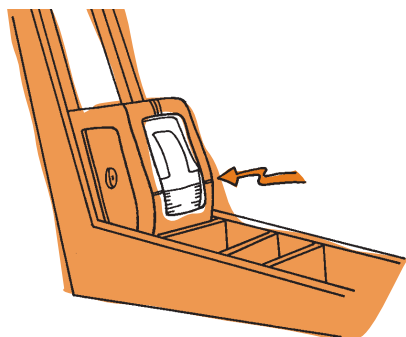


e) Fija firmemente la cinta métrica a la pared con tela adhesiva y desliza la escuadra hacia arriba, cerciorándote de que la cinta métrica se encuentre recta (emplomada perpendicular al horizonte).

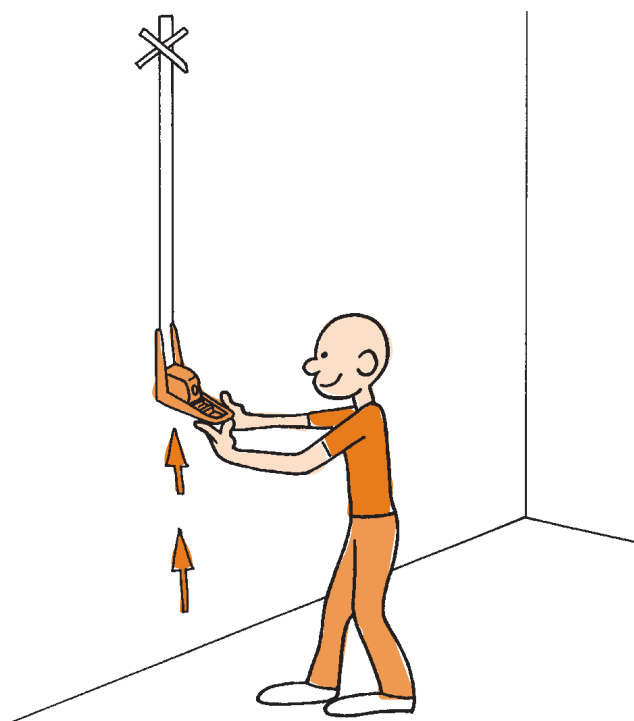


Antes de medir, vigila que el niño(a) se quite los zapatos, y en el caso de las niñas, no traigan diademas, broches, colas de caballo, medias colas, etcétera, que pudieran falsear la estatura.

La estatura se mide con la persona de pie y sin zapatos ni adornos en la cabeza que dificulten o modifiquen la medición.

1) Coloca al sujeto para realizar la medición. La cabeza, hombros, caderas y talones juntos deberán estar pegados a la pared bajo la línea de la cinta del estadímetro. Los brazos deben colgar libre y naturalmente a los costados del cuerpo.

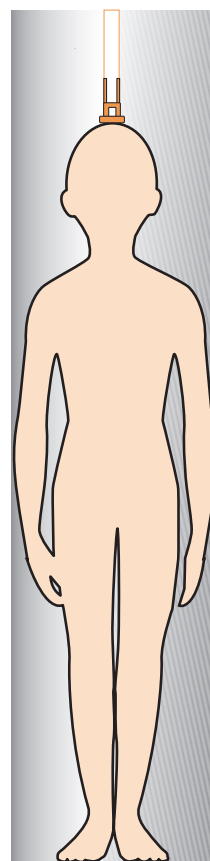

- 2) Mantén la cabeza de la persona firme y con la vista al frente en un punto fijo. Solicita que contraiga los glúteos, y estando frente a él coloca ambas manos en el borde inferior del maxilar inferior del explorado, ejerciendo una mínima tracción hacia arriba, como si desearas estirarle el cuello.
- 3) Vigila que el sujeto no se ponga de puntillas colocando su mano en las rodillas, las piernas rectas, talones juntos y puntas separadas, procurando que los pies formen un ángulo de 45° .
- 4) Desliza la escuadra del estadímetro de arriba hacia abajo hasta topar con la cabeza del sujeto, presionando suavemente contra la cabeza para comprimir el cabello.
- 5) Verifica nuevamente que la posición del sujeto sea la adecuada.

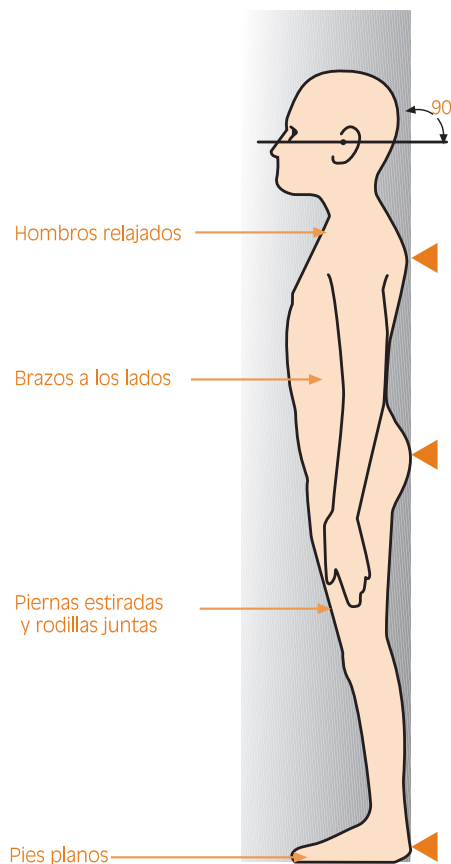

a) Posición de la cabeza

no



sí




no




b) Posición de la escuadra



no

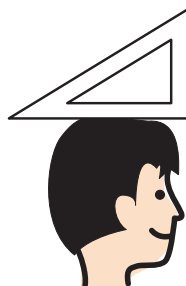

sí

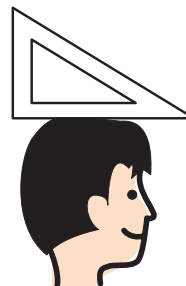


no

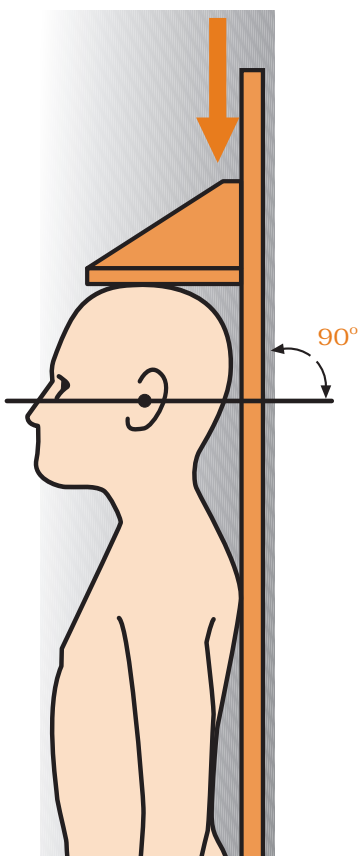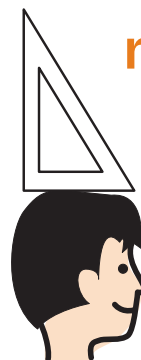


c) Cuidado con el cabello


no

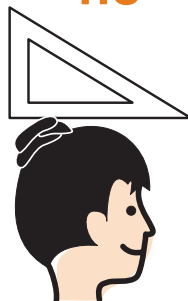

no

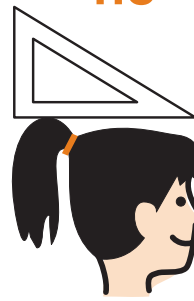

sí

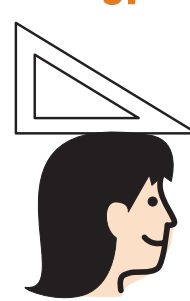

6) Apóyate en otra persona para que tome la lectura de la medición; para ello cuida que la escuadra del estadímetro se encuentre pegada a la pared y horizontal al plano de medición.

7) Realiza la lectura con los ojos en el mismo plano horizontal que la marca de la ventana del estadímetro y registra la medición con exactitud de un mm: por ejemplo, 147.6. La lectura se hace de arriba hacia abajo.

